



inogen connect  
GETTING STARTED GUIDE  
Android  
Apple

# Before You Start

**1 Download App**  
From your smart device, go to the **APP STORE (APPLE)** or **Google Play (ANDROID)**, search for the **Inogen Connect App** and download the software. A download link is also included in your welcome email. Please double click the underlined text in your email from Inogen to download the software.



**2 Plug In Your Inogen One G4**  
Connect the AC power supply cord to the concentrator. Plug the power supply AC cord into an electrical outlet. **Do not power on G4 concentrator.**



inogen connect

# Pairing

**3 Pair Your Mobile Device With Your G4**


- Go to **Settings** on your smart device and **turn on Bluetooth**.
- Slide the button to the right to turn on Bluetooth.
- Next, **turn on Bluetooth on your concentrator** by holding down the minus button until the Bluetooth symbol appears on the concentrator's display.



**4 Open Inogen Connect App**  
The Inogen Connect Code can be found in your confirmation email or provided by your home care provider. Enter your Inogen Connect Code by:

- Manually entering.
- Use your smart device's camera to scan the QR code found on your invoice (must allow access to your camera through the app)


*Pairing is the term used to describe the process of wirelessly connecting two Bluetooth devices for the first time. "Pairing" allows the devices to recognize each other and creates a unique lasting connection between the specific devices.*

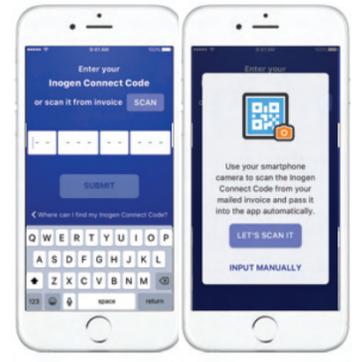


inogen connect

# Pairing

**5 Search for Concentrator**  
Click on "Search for Concentrator" at the bottom of your screen.

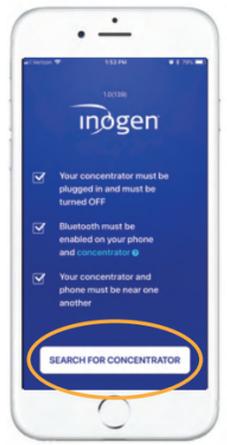

**6 Select Serial #**  
When device is found, select your desired **Concentrator Serial Number** on your smart device.

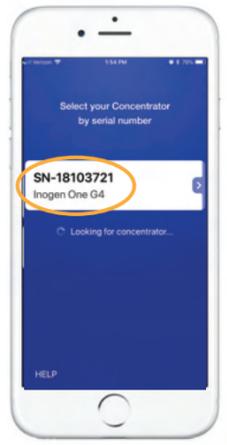

**7 Terms & Conditions**  
Read the **Terms and Conditions** and if you choose to accept, select the "I Accept" button at the bottom of your screen. There may be an additional consent statement for some locations. Read the **consent statement** and if you choose to accept, select the "I Accept" button at the bottom of your screen.



**8 Press Bell Button**  
Press and hold the **bell button** on your G4 concentrator to finish pairing.



inogen connect

**9 Wait to Pair**  
Please wait - your concentrator is pairing.

**10 Pairing Complete**  
Your **Inogen One G4** is now paired with your smart device! Now you can turn on your Inogen One G4 and use it normally. The information displayed on your **Inogen Connect** screen will vary depending on your concentrator's current state.

For further information, see the Inogen Connect FAQ section at [www.inogen.com/app/](http://www.inogen.com/app/)



THE PURPOSE OF THE INOGEN MOBILE APP IS TO PROVIDE ADDITIONAL CONVENIENCE TO THE PATIENT. HOWEVER, THE USER INTERFACE PANEL REMAINS THE PRIMARY SOURCE OF INFORMATION TO WHICH THE PATIENT SHOULD REFER.

inogen connect

**Location Information.** When you use our mobile applications, we receive your precise location information. We may also collect the precise location of your device when the app is running in the foreground or background / when the app is closed. We use your location information to monitor the location of our equipment, locate lost or stolen equipment, perform market analysis, and locate nearby service representatives and branch offices. We also infer your more general location information (for example, your IP address may indicate your more general geographic region). We may disclose the information we collect about you (including your location information) with homecare providers involved in your care. The Inogen Connect App is compatible with the following devices: iPhone 5 and later; iPad Air; iPad Air 2; iOS 9 and later; Samsung S5 and later; Nexus 5; Nexus 6; Nexus 6; Nexus 6; Android 6 and later. Compatible device models are subject to change at any time without notice.



## Avant de commencer

### 1 Téléchargez l'application

Sur votre appareil intelligent, allez à l'**App Store (Apple)** ou à **Google Play (Android)**, recherchez l'**application Inogen Connect**, puis téléchargez-la.

Un lien de téléchargement est également inclus dans votre courriel de bienvenue. Veuillez cliquer deux fois sur le texte souligné dans votre courriel d'Inogen pour télécharger l'application.



### 2 Branchez votre Inogen One G4

Connectez le cordon d'alimentation CA au concentrateur. Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise électrique.

**N'allumez pas le concentrateur G4.**



inogen connect

## Appariement

### 3 Appariez votre appareil mobile avec votre G4

- Allez à **Paramètres** sur votre appareil intelligent et **activez le Bluetooth**.
- Faites glisser le bouton vers la droite pour activer le Bluetooth.
- Ensuite, **activez le Bluetooth sur votre concentrateur** en maintenant le bouton moins enfoncé jusqu'à ce que le symbole du Bluetooth s'affiche sur l'écran du concentrateur.



### 4 Ouvrez l'application Inogen Connect


Vous trouverez le Inogen Connect Code (Code Inogen Connect) dans votre courriel de confirmation ou votre fournisseur de soins à domicile vous l'a donné. Entrez votre Inogen Connect Code (Code Inogen Connect) en :

- l'entrant manuellement;
- utilisant l'appareil photo de votre appareil intelligent pour scanner le code QR qui se trouve sur votre facture (vous devez autoriser l'accès à votre appareil photo via l'application).

*L'appariement est un terme utilisé pour décrire le processus de connexion sans fil de deux appareils Bluetooth pour la première fois. « L'appariement » autorise les appareils à se reconnaître l'un l'autre et crée une connexion durable unique entre les appareils spécifiques.*



Exemple de code QR

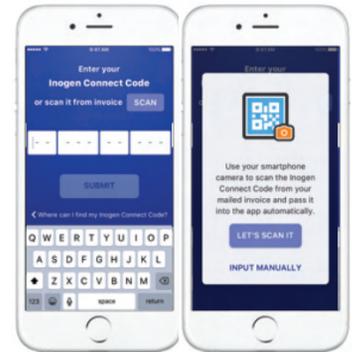

inogen connect

## Appariement


### 5 Recherchez le concentrateur

Cliquez sur « **Search for Concentrator** » (Rechercher le concentrateur) en bas de votre écran.



### 6 Sélectionnez le n° de série


Quand l'appareil est trouvé, sélectionnez votre **Concentrator Serial Number** (Numéro de série du concentrateur) souhaité sur votre appareil intelligent.

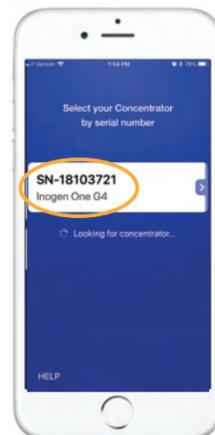

### 7 Conditions générales

Lisez les **Conditions générales** et, si vous choisissez de les accepter, sélectionnez le bouton « **I Accept** » (J'accepte) en bas de votre écran.

Il peut y avoir un consentement supplémentaire pour certaines régions. Lisez la **déclaration de consentement** et, si vous choisissez de l'accepter, sélectionnez le bouton « **I Accept** » (J'accepte) en bas de votre écran.

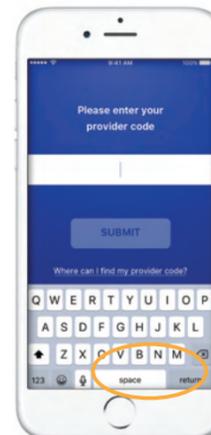

### 8 Appuyez sur le bouton de cloche

Appuyez sur le **bouton de cloche** et maintenez-le enfoncé sur votre concentrateur G4 pour terminer l'appariement.



inogen connect

### 9 Attendez l'appariement

**Veillez patienter**, votre concentrateur est en cours d'appariement.

### 10 Appariement terminé

Votre **Inogen One G4** est désormais apparié avec votre appareil intelligent! Maintenant, vous pouvez activer votre Inogen One G4 et l'utiliser normalement. Les renseignements affichés sur votre écran **Inogen Connect** varieront en fonction de l'état actuel de votre concentrateur.

Pour en savoir plus, consultez la section FAQ Inogen Connect sur le site [www.inogen.com/app/](http://www.inogen.com/app/)



**L'APPLICATION MOBILE INOGEN A POUR OBJECTIF DE FOURNIR UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE AU PATIENT. CEPENDANT, LE PANNEAU D'INTERFACE UTILISATEUR RESTE LA SOURCE D'INFORMATION PRINCIPALE À LAQUELLE LE PATIENT DOIT SE RÉFÉRER.**

Inogen, Inc.  
301 Coromar Drive,  
Goleta, CA 93117  
1-877-4-INOGEN (numéro vert)  
1-877-446-6436 (numéro vert)  
1-805-562-0515 (international)  
info@inogen.net  
www.inogen.com

**Informations de position.** Quand vous utilisez nos applications mobiles, nous recevons vos informations de position précises. Nous pouvons également recueillir la position précise de votre appareil quand l'application fonctionne en premier plan ou en arrière-plan quand l'application est fermée. Nous utilisons vos informations de position pour surveiller l'emplacement de notre équipement, localiser l'équipement perdu ou volé, réaliser une étude de marché et localiser les représentants de service et les succursales à proximité. Nous divulguons également vos informations de position plus généralement (par exemple, votre adresse IP peut indiquer votre région géographique plus généralement). Nous pouvons divulguer les renseignements que nous recueillons sur vous (y compris vos informations de position) aux fournisseurs de soins à domicile qui participent à vos soins. L'application Inogen Connect est compatible avec les appareils suivants: iPhone 5 et versions ultérieures; iPad Air; iPad 2; iOS 9 et versions ultérieures; Samsung S5 et versions ultérieures; Nexus 5; Nexus 6; Nexus 6; Android 6 et versions ultérieures. Les modèles d'appareils compatibles sont sujets à modifications à tout moment sans préavis.

inogen connect

96-08826-00-02 Rev. C

inogen connect